

NEW

ASUKA COMPANION COMPACT

CTC-15

Smart Coat™ Plus 技術による
デュアルダイオードレーザー

コンパクトになって使いやすい
2波長レーザーシステム

コンパクトだから
肩掛けでの
使用も可能で
持ち運びに便利です


大動物・小動物など
様々な動物に
対応しています

疼痛緩和・
創傷治癒の治療に
ご利用ください





- 808nmと980nmの2つの波長と高出力によって、効果的な治療を短時間で行うことができます。
- 動物の皮膚の状態や毛の色、毛の長さ、治療を行う部位や目的などを入力する事により適切な照射条件が自動設定されます。
- 治療目的に合った波長・出力設定・照射時間の組み合わせのプロトコルが整備されており、安定した治療ができます。
- 据え置きでのご使用も、充電電源カートリッジを使っ
てのポータブルタイプとしてのご使用も可能です。
また、複数の充電電源カートリッジで使用中、長時間
の稼動が可能となります。

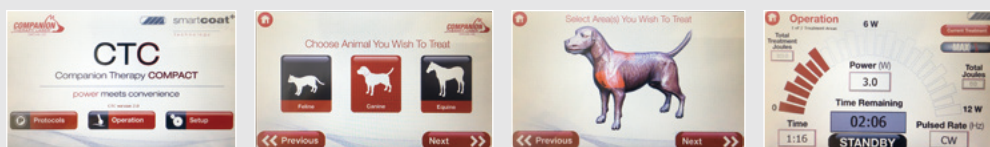

波長	980nm、808nm
出力	15W
スポット径	プローブ交換により調節可能
照射モード	連続波 2Hz、10Hz、20Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz、2500Hz、5000Hz、10000Hz
ガイド光波長	650nm
ガイド光照射周期	OFF／連続／パルス
アラーム音	OFF／連続／Beep
アラーム音量	High／Mid／Low
スイッチ操作	ハンド、フット (ON/OFF)
本体重量	3.1kg (ACアダプタ (1.0kg) 含まず)
本体寸法	350×220×160 (mm)
電源入力	100～240V、50～60Hz
使用環境温度	10～35℃ (但し結露しないこと)
保管環境温度	-20～+70℃ (但し結露しないこと)

※外観・仕様・構成は製品改善の為、予告無しに変更する場合があります。予めご了承ください。
動物用医療機器承認番号：28動薬第4017号



ACアダプタ



動物用保護メガネ



Zカート

option



レーザー医療の可能性を世界に

飛鳥メディカル株式会社

開発センター：京都府京田辺市興戸地藏谷1番地 同志社大学連携型起業家育成施設2階 TEL.0774-65-2233 FAX.0774-65-2288

東日本営業所：埼玉県川口市金山町12-1 サウスゲートタワー川口2F TEL.048-290-8288

大阪オフィス：大阪府大阪市中央区谷町2-3-1 TEL.06-7878-6993

URL www.asuka-med.com