

FOR 72 HOURS
Wearable vital signs sensor



VEMO
Plus

ペット用ウェアラブル・バイタルサイン・モニター

VEMO Plus

(ベモ・プラス)

バイタル管理の革命

小さなパッチで、遠隔管理がお手軽に!

簡単操作で、大切なペットの
バイタルサインをモニタリング



ペットのデータをクラウド上にてリアルタイムで遠隔管理
最大72時間の連続監視可能(フル充電時)



モニターパラメータ：ECG、脈拍数、
呼吸数、表皮温度



リアルタイムのアラーム機能で、
ペットの安全を管理



モバイル・デバイス1台で
6匹まで同時監視



ウェアラブル・ユニットの粘着パッドは、
皮膚に優しい生体性適合の粘着ゲル



モバイル・デバイスとの
Bluetooth接続が簡単


仕様

ウェアブル・ユニット(モニター)本体



サイズ・重量：	32 mm×90 mm×8.5 mm /18 g
ECG：	1チャンネル
脈拍数：	40～300/分
呼吸数：	5～60/分
表皮温度：	10～45℃
サンプリングレート：	128、250、500 Hz
ワイヤレス接続：	Bluetooth 5.1
防水/防塵：	IP 26
互換OS：	iOS および Android

デバイス・スクリーン

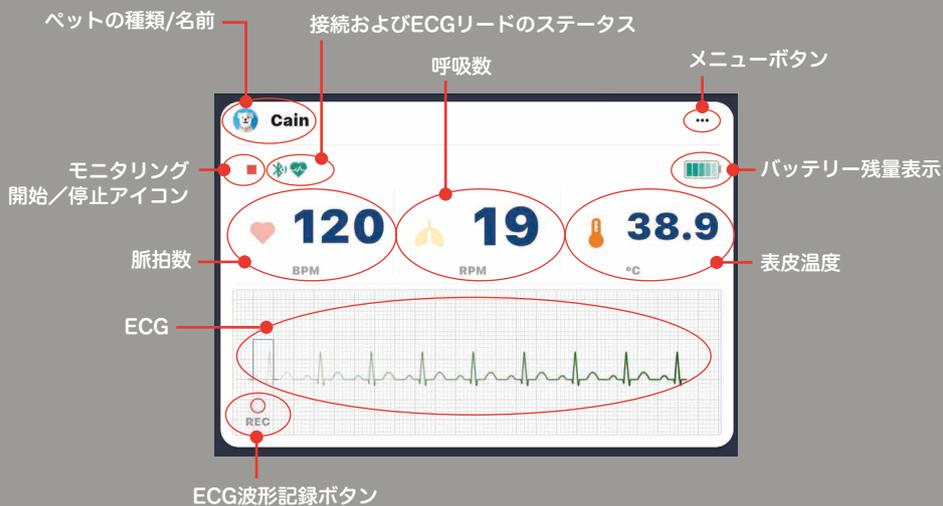

*USB充電器



点滅時：充電中
点灯時：充電完了

製品構成



VEMO Plusウェアブル・
ユニット(モニター)本体



VEMO Plusウェアブル・
ユニットの粘着パッド



VEMO Plus専用USB充電器


セントラルおよび遠隔監視機能のフロー



VEMOコネク
(VEMO Plusをペットの胸部に貼付)



クラウドストレージ

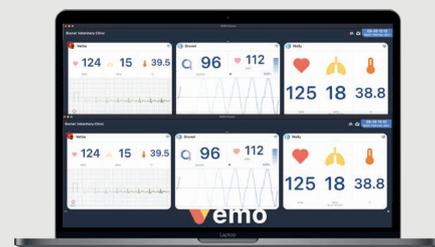

VEMOセントラル

VEMOコネク

- ・測定データの管理アプリ
- ・モバイル・デバイス1台で、6匹まで同時監視
- ・リアルタイムのアラーム管理
- ・測定データをAWSクラウドサーバーへ保存して遠隔管理



VEMOセントラル



- ・PCやモバイル・デバイスによる、リアルタイムのセントラル・モニタリング
- ・ネットワークへの接続時および非接続時の、最大24匹の同時監視
- ・iOS、Android、Mac OSおよびWindows使用可
- ・AWSクラウドサーバー経由で、リアルタイムの遠隔監視

デバイス側仕様




iOS	Apple	Android	Android
iPad(6世代以上)	デバイス	以下の仕様に準ずるAndroid タブレットなど	
9.7インチ以上	スクリーン	8.4インチ以上	
Quad-Core 2.34 GHz以上	CPU	Octa-Core 1.8 GHz以上	
2 GB以上	RAM	3 GB以上	
iOS 11.3以上	OS	Android 9以上	
有効	Wi-Fi	有効	
4.0以上	Bluetooth	4.0以上	

ディスプレイ・モード



複数のペットを同時監視

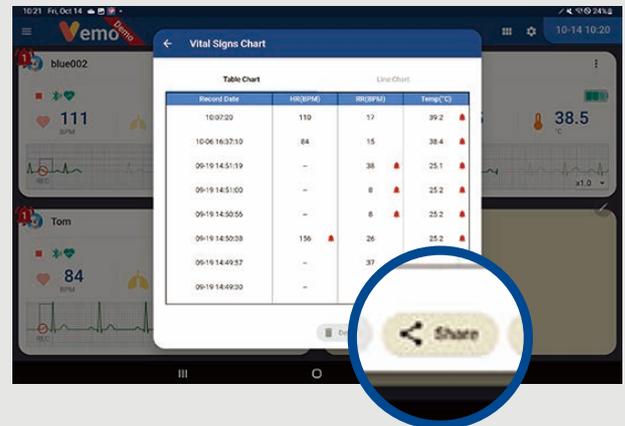

ペットの測定データをPDF化。
データはクラウドサーバーに保存されるので、
いつでもアクセス可能。

動物医療機器製造販売届け出番号：5 動薬第1282号

製造販売業
Koutec, Inc.
コウテック株式会社
〒356-0041 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ舞 1-2-13
TEL:049-263-6273 FAX:049-265-3368

販売元
JSS 株式会社ジェイエス エス
エンフェイト事業部
http://enfatehealthcare.com
〒160-0018 東京都新宿区須賀町3番地 マリールズビル1F
TEL: 03-5341-4516 FAX: 03-5341-4517

販売代理店
飛鳥メディカル株式会社
〒610-0332 京都府京田辺市興戸地藏谷1番地 D-egg2F
TEL: 0774-65-2233 FAX: 0774-65-2288
www.asuka-med.com